




## Этапы подключения SDU100, SDU200, SDU300

1




2

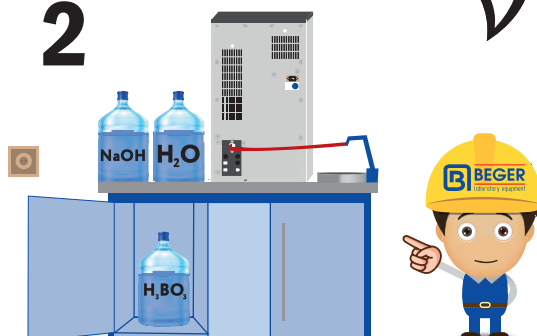


Шланг №1 с металлической оплеткой и резьбой 3/4" подключаем к разьему «Water Inlet», а другой конец к холодному водопроводу (Подключается во всех моделях дистилляторов SDU)

3

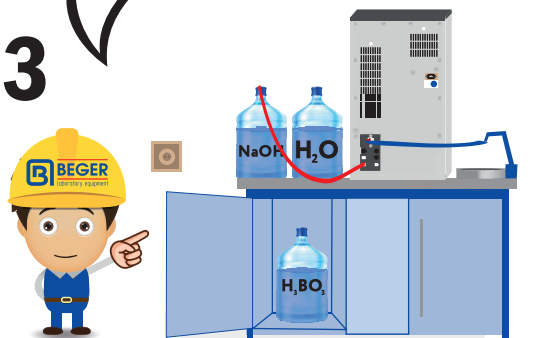

Подключаем шланг №2 к разьему «NaOH», а другой конец опускаем в бутылку с «NaOH» (Подключается во всех моделях дистилляторов SDU)

4

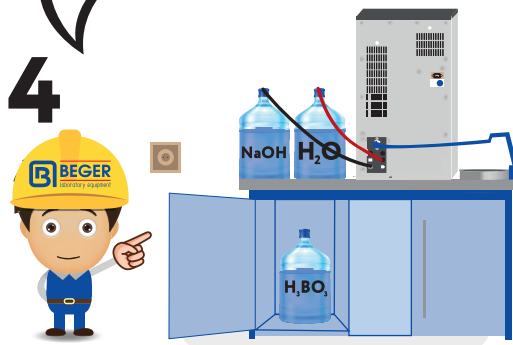

Шланг №3 подключаем к разьему «H<sub>2</sub>O for steam generator» и опускаем другой конец шланга в бутылку с дистиллированной водой (Подключается во всех моделях дистилляторов SDU)

5



Шланг №4 подключаем к разьему «Water outlet», а другой конец к канализации/в раковину (Подключается во всех моделях дистилляторов SDU)


6



Шланг №5 подключаем к разьему «H<sub>2</sub>O in probe» и опускаем другой конец в бутылку с дистиллированной водой к шлангу от H<sub>2</sub>O for steam generator. (Только для моделей SDU200, SDU300)

Шланг №6 подключаем к разьему «H<sub>3</sub>BO<sub>3</sub>» и опускаем другой конец шланга в бутылку с «H<sub>3</sub>BO<sub>3</sub>». Бутылка должен находится ниже уровня прибора! (Только для модели SDU300)

7

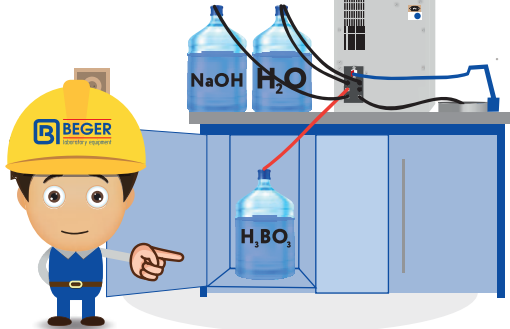

Подключаем сетевой кабель в разьем «220 VAC» и розетку.

8



Установите приемную колбу в передней части прибора и опустите в нее сточную трубку.

10



9  
! Длина соединительных шлангов 1,5 м, размещать прибор в непосредственной близости от водопровода и канализации.

11  
Не забудьте открыть кран подачи холодной воды.

! Если у Вас возникли вопросы, пожалуйста обращайтесь к нам



Включите прибор нажав на кнопку "On".

12

